




Microscópio Especular
de não contato

VOROCCELL

Microscópio Especular VOROCELL

Um equipamento de alta tecnologia, rápido e preciso para completa análise e diagnóstico do endotélio e paquimetria

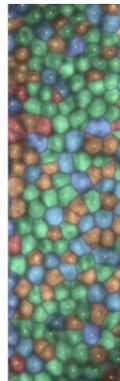

Não perca nenhum detalhe!


Com o VoroCell é possível capturar uma sequência de até 300 imagens em segundos e rapidamente selecionar e processar quantas imagens o usuário desejar fazendo uma média dos valores obtidos. A sequência das imagens do endotélio ampliadas 200 vezes proporcionam mais liberdade ao examinador na escolha da região a ser processada. O laudo completo pode ser impresso com as imagens, curva com relação a idade, gráficos de polimorfismo e polimegatismo bem como os dados histológicos e estatísticos.

Hardware

- Óptica importada
- Captura por tecla ou pedal
- Equipamento de não contato
- Captura sequencial de até 300 imagens
- Hardware e software desenvolvidos no Brasil
- Captura de imagens em qualquer região da córnea
- Área fotografada de 0,25mm - 0,54mm (ajustável)
- Velocidade da câmera de 60 frames por segundo
- Ajuste linear da luz de fenda para cada tipo de córnea

Software

- Possibilidade de editar, adicionar ou remover células
- Impressão de mapas coloridos e Laudos em PDF
- Processamento automático da área selecionada
- Alta velocidade no processamento das imagens
- Algoritmo de processamento inteligente
- Processa várias imagens (média)
- Interface amigável em português
- Paquimetria óptica
- Assistência técnica remota

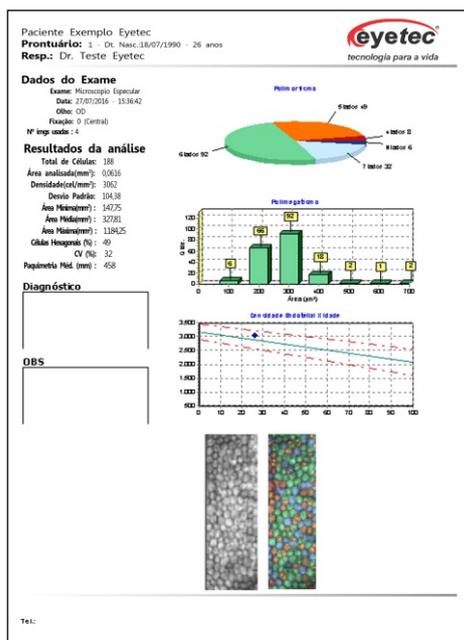

Especificações Técnicas

Alimentação elétrica	110v ~ 220v
Frequência	60 Hz
Corrente de entrada	150 - 350mA
Fusível externo	1A
Dimensões	340x330x480
Magnificação	200x aprox.
Peso	12,6 Kg
Conexão	USB
Fixação	1 central + 6 perifér.

Itens Inclusos

Notebook de última geração / Pedal de captura
Mesa elétrica Eyetec 90v ~240v autom.

Eyetec Equipamentos Oftálmicos
Gelsomino Saia, nº 260, São Carlos - SP
Tel:0800 771 3012 / 016 3363-3012
faleconosco@eyetec.com.br

eyetec
tecnologia para a vida